

<b>Paciente</b>	
<b>Cliente</b>	
<b>Técnico</b>	

<b>Pedido</b>	<b>O.Fabricación</b>

**Entrada de datos**

Fichero escaneado estructura prótesis       Fotos protesís

Lado cover:  
IZQ \_\_\_\_ DCH \_\_\_\_


**Fabricacion**

MATERIAL TPU Flex       Pale Skin       Medium Skin       Tan Skin       Negro

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Montar y alinear la prótesis, con todos sus componentes en la posición final, pie, botón de liberación del bloqueo, válvula de vacío, ...
- Colocar una cinta o cordón, sobre el encaje, a la altura aproximada donde debe terminar la cubierta de forma que proporcione relieve para el escaneado,
- Tomar las medidas, AP, ML y de perímetro en la cinta colocada
- Escanear el exterior de la prótesis completa, enviar fichero en formato .stl
- Indicar las medidas del lado sano
- Enviar fotos de la prótesis frontal, lateral, posterior y medial

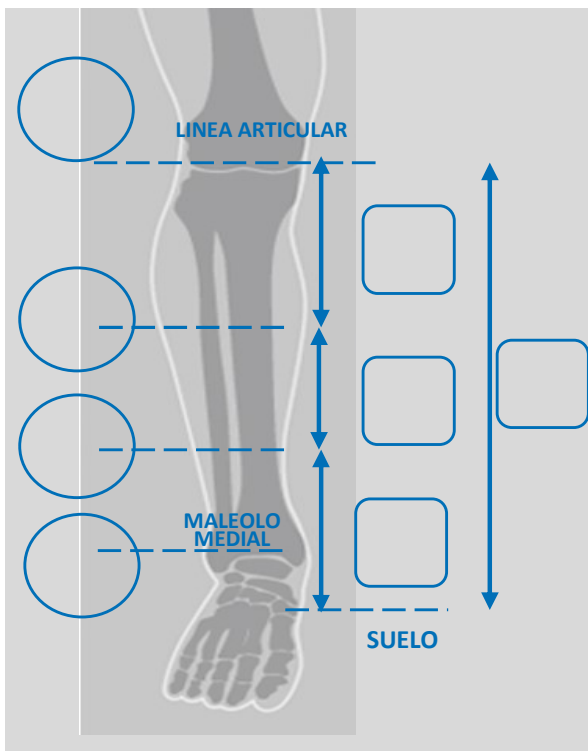

Medidas lado sano

